

L'ACTIVATION DU DISJONCTEUR



Une clé vous sera remise le jour de la pose.

Une activation sera faite devant vous et nous vous laisserons en réaliser une seconde afin de vérifier que vous ayez bien compris comment procéder.



DURÉE

Chaque activation élargit le maxillaire de 0,25mm. Une à deux activations par jour sera nécessaire pendant une durée de 10 à 15 jours selon l'importance de la dysmorphose initiale. Le disjoncteur sera laissé 6 mois.




PRÉCAUTION

Le port de l'appareil ne doit pas empêcher de se **brosser les dents 3 fois par jour**. Il faut **utiliser de préférence une brosse à dents souple et les brosser après chaque repas**. Il faut utiliser la brosette pour nettoyer les endroits difficilement accessibles de mon disjoncteur si des aliments s'y bloquent.




Il faut tout d'abord **insérer la clé dans le trou** le plus en avant (vers les incisives)

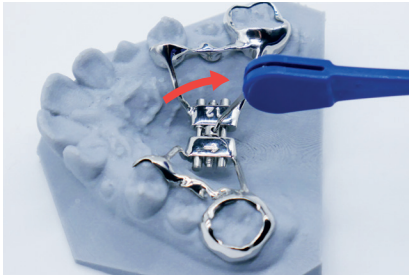

La clé étant articulée, il suffit ensuite de **pousser doucement et progressivement dans le sens de la flèche**, c'est-à-dire vers l'arrière.



L'activation est terminée quand on arrive en butée. Il n'est pas possible d'aller plus loin et le second trou de la future activation est à présent visible vers l'avant

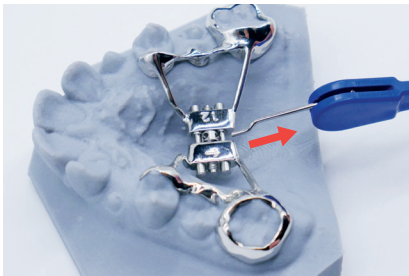

Il faut alors **retirer la clé en prenant garde de ne pas revenir en arrière** afin de ne pas gêner l'activation suivante.